

PhysioCup®



Riduci la Cellulite e Tonifica la pelle
in **5 Fasi**

FASE 1 - Lubrifica la zona del Massaggio


Applica un leggero strato di Olio per massaggi sulla zona da trattare. Ti consigliamo l'Olio Naturale Physiosal, elasticizzante, rigenerante, con Sale Marino Integrale, Olio di Argan, Mandorla, Elicriso. Ideale per questo tipo di trattamento!



FASE 2 - Regola l'intensità di PhysioCup

Regola l'intensità della coppetta, stringendo più o meno forte. Posizionala sulla zona da trattare, quindi rilasciala per ottenere un "effetto ventosa".

Consigliamo un aumento graduale dell'intensità.

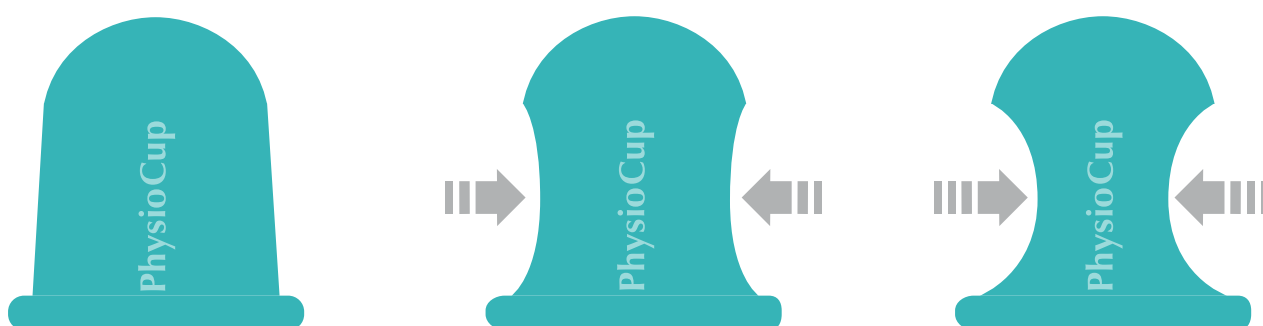


FASE 3 - Massaggia la zona interessata

Se la coppetta rimane correttamente attaccata, puoi iniziare il massaggio. Falla scorrere sulla zona da trattare per almeno 8 minuti. Indicazioni per:

- . **Glutei** - Posiziona la coppetta al centro del gluteo ed esegui movimenti circolari sempre più ampi, dall'interno verso l'esterno.
- . **Zona anteriore della gamba** - Posiziona la coppetta poco sopra al ginocchio e sali con movimenti lineari fino all'inguine. Rilascia e ricomincia.
- . **Zona posteriore della gamba** - Posiziona la coppetta dietro al ginocchio e sali con movimenti lineari fino al gluteo. Rilascia e ricomincia.
- . **Zona laterale della gamba** - Posiziona la coppetta nella parte laterale della gamba, poco sopra al ginocchio, sali con movimenti ondulati fino all'anca. Rilascia e ricomincia.

Utilizza PhysioCup almeno 3 volta la settimana per 30 giorni. Nei giorni in qui non utilizzi PhysioCup mantieni la pelle idratata con Olio e Crema Anticellulite Physiosal.

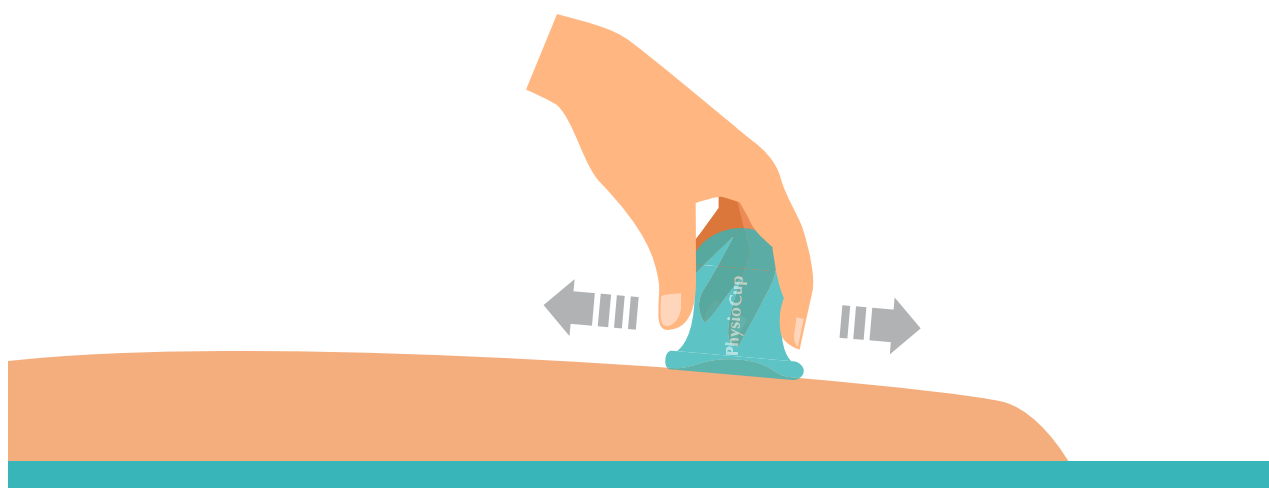

FASE 4 - Tonifica e Rigenera

Al termine di ogni massaggio (fai trascorrere 60 secondi), quando l'effetto della coppettazione è ancora visibile (pelle più rossa), aumentane l'efficacia applicando lo Spray Rassodante Physiosal. Gli estratti botanici di cui è composto tonificano e proteggono le pareti dei capillari, stimolano la circolazione venosa e favoriscono lo scioglimento di accumuli adiposi. Se il hai scelto un trattamento che prevede anche l'uso della Crema Anticellulite Physiosal, alterna Crema a Spray Rassodante (esempio: Giorno 1 Spray; Giorno 2 Crema Anticellulite).

I prodotti Physiosal sono Naturali, si possono applicare più volte al giorno tutti i giorni.



FASE 5 - Idrata

Entro 20 minuti dal termine del massaggio, idrata il tuo corpo bevendo almeno 30 ml di acqua (circa 2 bicchieri). Questo favorirà lo smaltimento delle tossine liberate durante il trattamento con PhysioCUp.



Assistenza Clienti

Se necessiti di ulteriore assistenza su come utilizzare PhysioCup scrivi una mail a: physiocup@physiosal.com

Ci impegniamo a rispondere entro poche ore dalla richiesta, tutti i giorni, anche festivi.

PhysioCup[®]

PhysioCup è un prodotto ideato e realizzato da Physiosal.
maggiori informazioni sui prodotti, visitando la pagina
del sito www.physiosal.com